
④ **检测**

① **将加完样的盘片放入机器，确保盘片凹槽与托盘卡扣对齐扣紧，点击关闭舱门按钮**



② **选择固定套组或自由组合**

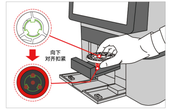

③ **确认测试项目**



④ **填写病患信息（橙色部分必填）**



⑤ **订单确认，开始测试，进入倒计时**

- 如需取消测试请点击取消检测按钮
  当前盘片已作废，不可再次使用




⑥ **检测完成后，屏幕显示报告单**

- 报告单可通过硕小检平台打印



5 报告查询与打印

在硕小检上依次选择：我的-订单管理，可在此界面切换查询"实验室报告"与"仪器报告"。

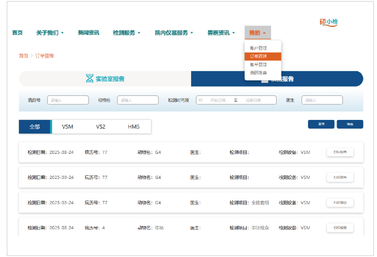

如需连接医院管理系统，请联系对应系统工程师进行对接。

zoetis

请关注硕腾检测服务在线官微
获取产品信息、售后服务


企业：硕腾（上海）企业管理有限公司
电话：400-920-2216
传真：021-2216 0288
网址：https://www.zoetis.cn
邮编：200080
地址：上海市虹口区四川北路88号星荟中心T2座21-22楼

* 最终解释权归硕腾（上海）企业管理有限公司所有

VSM

硕腾全自动生化分析系统
快速指南 V1.0

设备端

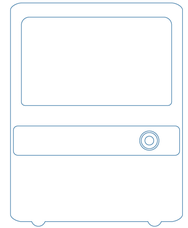

配置清单

装箱物品名称	数量
VSM 兽用生化及电解质分析仪	1 台
电源线	1 根
移液枪 100μL	1 把
快速指南	1 张
产品合格证	1 张
防尘海绵	1 个

1 安装环境

将 VSM 生化分析仪放置在一个水平面上，没有动物毛发、灰尘和其他污染物，不要放置在阳光直射或附近有其他潜在热源的地方。

将直流插头插入分析仪背部的电源插孔，然后将电源适配器的交流插头插入市电插座（要求市电插座接地）。

2 VSM设备组成

以 VSM系列为例，不同型号分析仪的操作界面、设备配置有所不同，请以实物为准。



3 VSM与硕小检绑定

用于报告查询与打印、账单查询

① 通过以下任意方法，完成 VSM 网络连接

1. **WiFi连接** 系统设置-通讯-无线局域网，右上角图标 亮起，说明WiFi连接成功。
2. **网线连接** 使用网线将VSM连接到任意有网络信号的网口，右上角图标 亮起，说明网线连接成功。

② 注册并登录硕小检

1. 通过电脑网址 https://zrlabs.zoetis.cn 进入硕小检注册页面。
2. 按照步骤填写个人信息与医院信息，并提交《营业执照》和《诊疗许可证》照片，客服在工作日4小时内进行账户审核，完成注册。

③ VSM 绑定硕小检

1. 在硕小检上选择：院内仪器服务-设备管理，进入设备管理界面。



2. 选择：添加设备-VSM生化分析仪，输入序列号与经销商名称，点击确认即可完成绑定。



*序列号可在设备后方标签上查看

4 生化检测流程

① 开机

接通电源，按下电源键，仪器自动升温并执行自检程序。

② 拿取试剂盘

1. 撕开铝箔袋，取出试剂盘，平放在桌面上。



2. 打开包装袋后，20min内进行使用。




③ 加样

1. **开启稀释液：**

面对盘片铝条所在的一面，顺着铝条延伸的方向将铝条从盘片撕下。




• 顺铝条延伸方向将铝条从盘片撕下

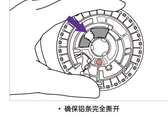

• 确保铝条完全撕开

2. **取样：**

请使用肝素锂抗凝
注意将移液枪枪头置于样本合适的位置，吸取100微升血样。

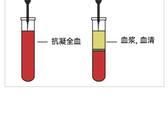

3. **加样：**

在加样孔中加入100微升血样。



VSM
VSM
VSM
VSM